


# Ifö Support

98126, 98220, 98221

**SE** WC-armstöd    **DK** WC-armlæn    **NO** WC-armlene    **GB** WC armrest

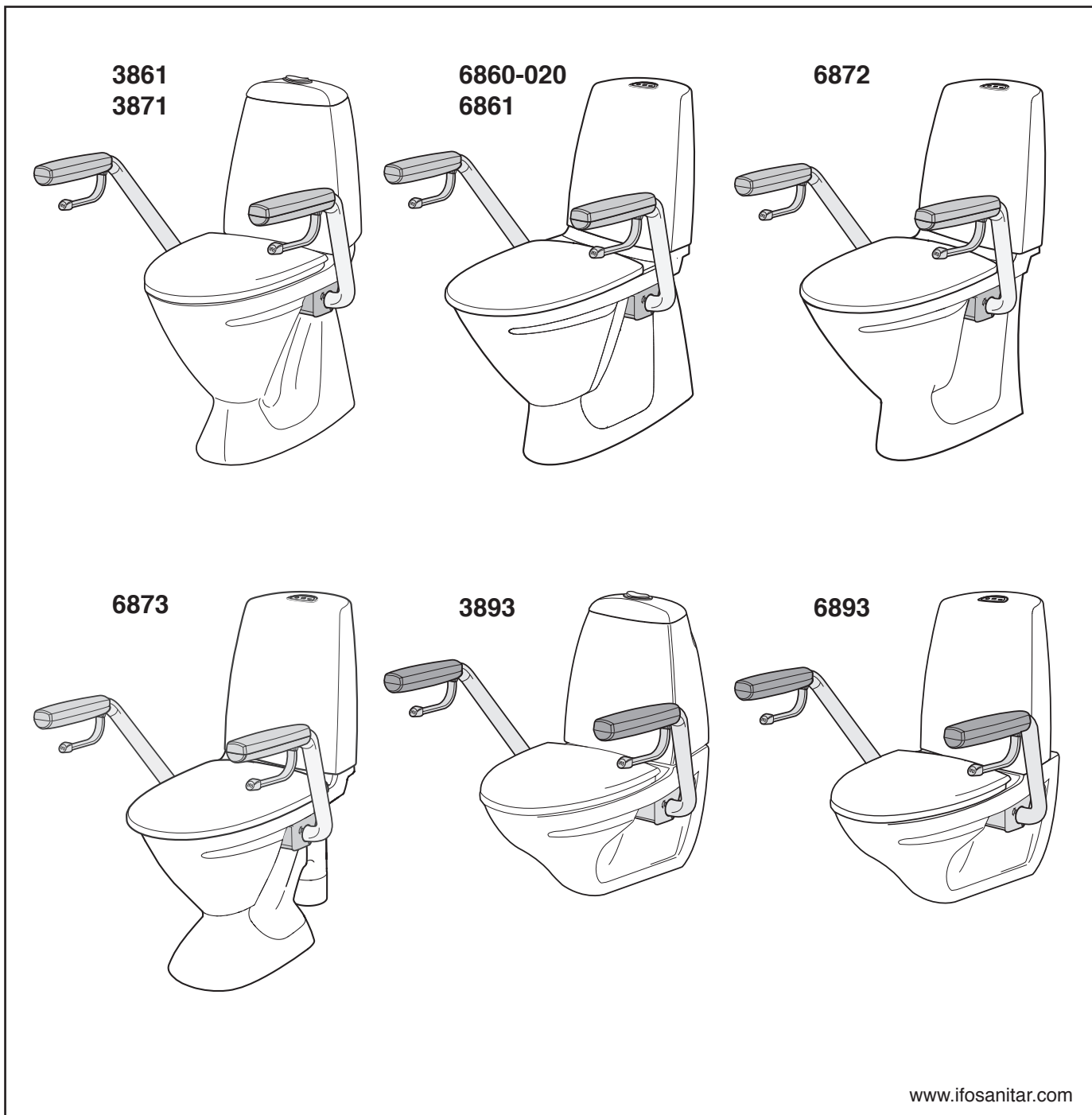

91045

[www.ifosanitar.com](http://www.ifosanitar.com)

- SE** Monteringsanvisning .....
- DK** Monteringsvejledning .....
- NO** Monteringsanvisning .....
- GB** Assembly instructions .....

**SE** WC-armstöden kan monteras på WC-stolar 6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871, 3893, 6893 som har hål för genomföring av armstödsaxeln. Ifö Sign – M6 mutter samt M8 (tjock bricka). Ifö Cera – M6 mutter. Säkra att muttrarna är ordentligt åtdragna. 98220 och 98221 monteras som 98126.

#### Reservdelar och tillbehör

Benämning	Ifö nr.	RSK-nr.
Långmutter M8.85 för montering tillsammans med Pressalit's sits	96347	
Toalettpappershållare	96348	
Monteringssett för armstöd Ifö Support	96349	7925210

**DK** WC-armlæn kan monteres på WC-stole 6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871, 3893, 6893 som har hul til gennemføring af armlæns-akslen. Ifö Sign – M6 møtrik og M8 (tyk skive). Ifö Cera – M6 møtrik. Sørg for at møtrikkerne er strammet ordentligt. 98220 og 98221 monteres som 98126.

#### Reserve dele og tilbehør

Benævnelse	Ifö nr.	VVS-nr.
Langmøtrik M 8.85 til montering sammen med Pressalit sæder	96347	
Toiletpapirholder	96348	
Monteringsset til Ifö Support armstøtter.	96349	615729890

**NO** Ifö Cera Support toalett-armlene kan monteres på 6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871, 3893, 6893 toaletter som har hull for gjennomføring av armleneaksling. Ifö Sign – M6 mutter og M8 (tykk skive). Ifö Cera – M6 mutter. Kontroller at mutterne er tilstrekkelig strammet. 98220 og 98221 monteres som 98126.

#### Reservdelar og tilbehør






	Ifö nr	NRF-nr.
Mutter M8.85 for montering av Pressalit sete sammen med Ifönr. 98126	96347	
Toalettpapirholder til Ifö Support toalettarmstøtte Ifönr. 98126	96348	
Monteringssett for Ifö Support toalettarmstøtte Ifönr. 98126	96349	6047236

**GB** The WC armrest can be mounted on WC's 6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871, 3893, 6893 provided with holes for inserting the armrest shaft. Ifö Sign – M6 nut and M8 (thick washer). Ifö Cera – M6 nut. Ensure nuts are tightened securely. 98220 and 98221 fitted as 98126.


#### Spare parts and accessories

	Ifö nr.
Metal screw-nut 8.85 for mounting together with Pressalit hard seat	96347
Toilet papers holder	96348
Mounting kit for Ifö arm support	96349


### 6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871, 3893, 6893

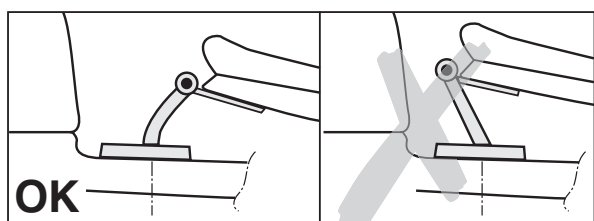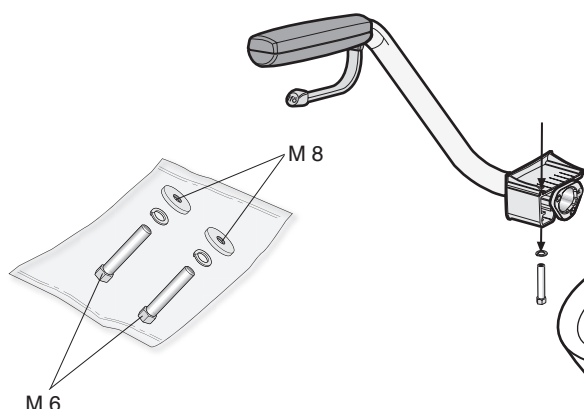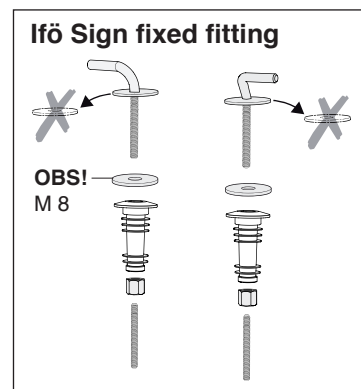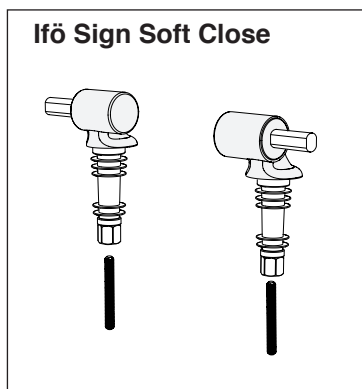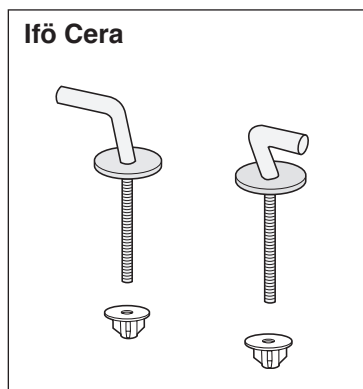

6860-020, 6861, 6872, 6873, 3861, 3871

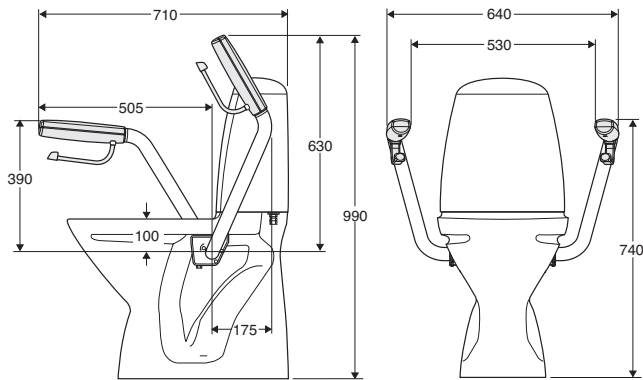

3893, 6893

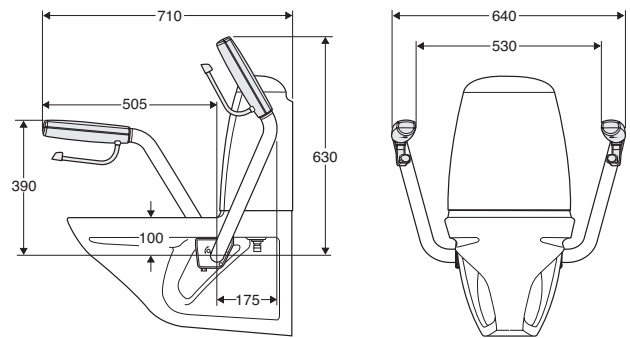

**SE**

För att säkra att WC-stolen står fast monteras denna enligt monteringsanvisningen för WC-stolar.

**Bruksanvisning**

Friktionen kan justeras.

**NO**

For å sikre at toalettet står stødig og fast, skal toalettet monteres i henhold til monteringsanvisningen som følger med toalettet.

**Bruksanvisning**

Friksjon for hev og senk av armlene kan justeres.

**DK**

For at sikre at WC-stolen står fast monteres denne i overensstemmelse med monteringsvejledningen for WC-stole.

**Betjeningsvejledning**

Friktionen kan justeres.





**GB**

To ensure the WC bowl is secure, it must be fitted according to the assembly instructions for WC bowls.


**User Instructions**

Friction is adjustable.

Friktionjustering  
Friktonsjustering  
Friksjonsjustering  
Friction adjustment

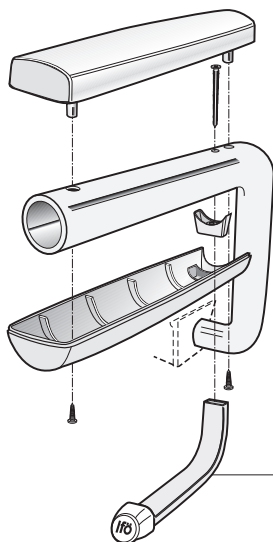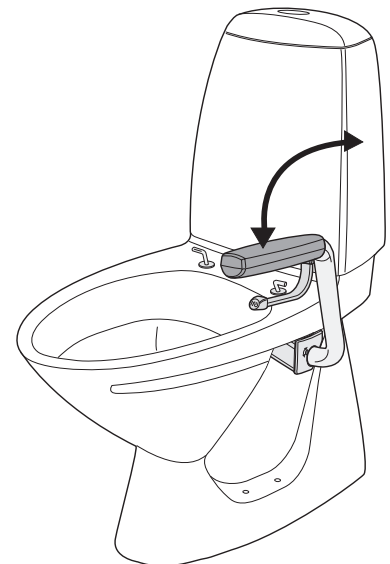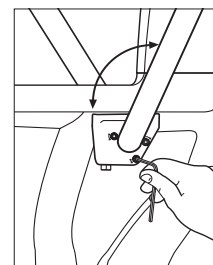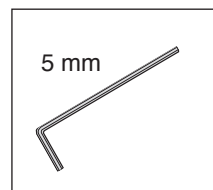

Pappershållare  
Papirholder  
Toalettpapirholder  
Toilet roll holder

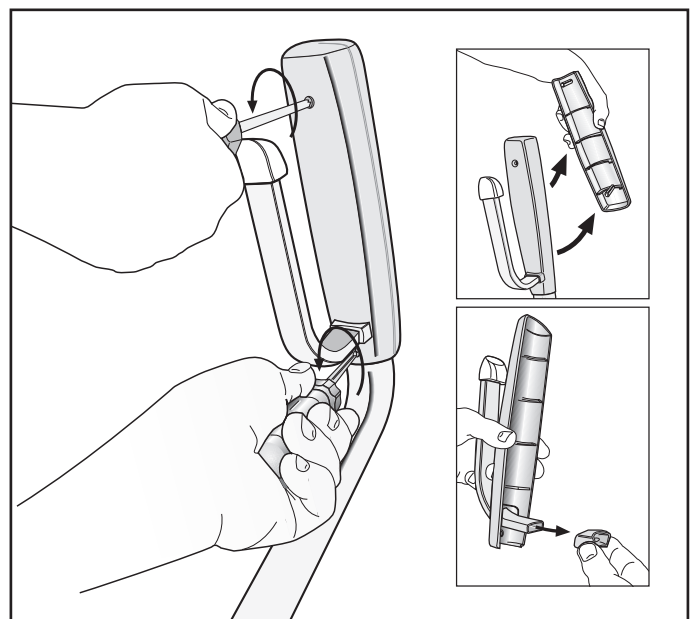

<b>SE</b>	<b>Ifö Sign hårsits</b>	99263, 99260 vit 99266 rød 99265, 99262 svart	<b>DK</b>	<b>Ifö Sign Hårdt toiletsæde</b>	99263, 99260 hvid 99266 rød 99265, 99262 sort
	<b>Ifö Cera hårsits</b>	99546 vit 99548 ceragrå 99549 svart		<b>Ifö Cera Hårdt toiletsæde</b>	99546 hvid 99548 ceragrå 99549 sort
<b>NO</b>	<b>Ifö Sign Hårdt sete</b>	99263, 99260 hvit 99266 rød 99265, 99262 svart	<b>GB</b>	<b>Ifö Sign Hard Seat</b>	99263, 99260 white 99266 red 99265, 99262 black
	<b>Ifö Cera Hårdt sete</b>	99546 hvit 99548 ceragrå 99549 svart		<b>Ifö Cera Hard Seat</b>	99546 white 99548 cera grey 99549 black

### **SE** Skötselråd

WC-armstöden är tillverkade av matteloxerad aluminium. Använd vanliga rengöringsmedel. Handtagen är tillverkade av ABS-plast. Använd vanliga rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel. Se till att rengöringsmedlet inte är allför länge i beröring med ytan utan skölj den med vatten.

### **DK** Vedligeholdelsesråd

WC-armlænene er fremstillet af mat-elokseret aluminium. Anvend almindelige rengøringsmidler. Håndtagene er af ABS-plast. Anvend almindelige rengøringsmidler, undgå organiske opløsningsmidler. Sørg for at rengøringsmidlet ikke er alt for længe i berøring med overfladen, skyl hurtigt efter med vand.

### **NO** Rengjøringstips

Ifö Cera Support toalettarmene er produsert i eloksert aluminium. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Håndtakene er produsert i ABS-plast. Unngå bruk av organiske løsningsmidler og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå langtidsberøring av rengjøringsmiddel.

### **GB** Maintenance advice

The WC armrest is manufactured in mat anodised aluminium. Use household cleaner. The arms are made of ABS plastic. Use household cleaner and avoid organic solvents. Do not leave cleaner in contact with the surface for too long, rinse with water.

## **CE** Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC Medical Device Directive 93/42/EEC



**SE**/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!  
**DK**/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele!  
**NO**/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen  
**GB**/For simple access to spare parts, save these instructions!



# Ifö

**Huvudkontor och tillverkning:** Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, [www.ifosanitar.com](http://www.ifosanitar.com)  
**Tillverkning:** Ifö Sanitär AB, SE-375 85 Mörrum, 0456-480 00  
**Distriktskontor:** Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,  
Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20  
**Norge:** Ifø Sanitær AS, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern A/S 44 50 04 04